



TV-Streamer+

Návod na používanie

Obsah

Úvod	3
Symbyly	5
Zoznámte sa so svojím prístrojom	7
Ako nainštalovať zariadenie	10
Prvé použitie zariadenia	12
Ako aktivovať streamovanie	17
Každodenné používanie	18
Všeobecné varovania a bezpečnostné opatrenia	21
Údržba	24
Technické špecifikácie	26
Regulačné informácie	28
Vyhlásenie	30
Podakovania	32
Záručný list	33

Úvod

Pozorne si prečítajte túto brožúru predtým, ako začnete používať toto zariadenie. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho odborníka pre starostlivosť o sluch.

Účel použitia

Zariadenie TV-Streamer+ je určené na bezdrôtové pripojenie k televízoru alebo inému zvukovému zariadeniu pre naše bezdrôtové načúvacie prístroje.

Zariadenie GN Hearing A/S TV-Streamer+ sa môže používať aj spolu so schválenými partnerskými výrobkami spoločnosti Cochlear Ltd alebo Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Schválený partnerský výrobok sa vzťahuje na konkrétne výrobky, ktoré uvádza na trh spoločnosť Cochlear Ltd alebo partneri spoločnosti Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Za akúkoľvek kompatibilitu schváleného partnerského produktu zodpovedá výhradne partner.

Cieľová skupina

TV-Streamer+ je určený na používanie neodbornými osobami.

Terapeutické indikácie

Samotné príslušenstvo nemá žiadne terapeutické indikácie.

Kontraindikácie

Žiadne známe kontraindikácie.

Symbols

Symbols uvedené nižšie sa používajú v tomto návode na používanie, na zariadení alebo na obale.



POZOR:Signalizuje situáciu, ktorá by mohla viesť k malým a stredným poraneniam.



VÝSTRAHA:Poukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym poraneniam.



Dátum výroby.



Zákonný výrobca.



Regulačné označenie zhody pre EÚ.



Dodržiavajte pokyny na používanie. (Modré logo)



Ref. katalógové číslo.



Unikátna identifikácia pomôcky.



Zariadenie podlieha certifikácii USA.



Sériové číslo.



Regulačné označenie zhody pre Japonsko.



Regulačné označenie zhody pre Austráliu a Nový Zéland.



Regulačné označenie zhody pre Malajziu.



Regulačné označenie zhody pre Taiwan.



Regulačné označenie zhody pre Kóreu.

CMIIT ID:
XXXxyyzzz

CMIIT ID: XXXxyyzzz



Pri likvidácii elektronických
zariadení dodržiavajte miestne
predpisy.




Certifikačná značka Anatel




Zariadenie obsahuje
rádiofrekvenčný (RF) vysielač.

Zoznámte sa so svojím prístrojom


Vybalenie - obsah škatule

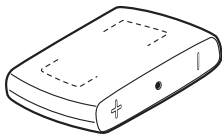


TV-Streamer+

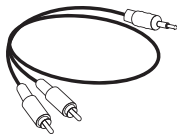


Analógový audio kábel

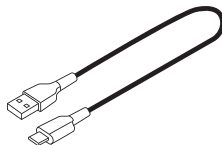

Kábel USB-A na USB-C

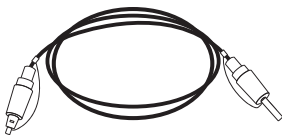

Digitálny (optický) audio kábel (pred použitím
odstráňte kryty zástrčky kábla)

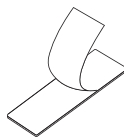


Suchý zips

Opis


Zariadenie poskytuje streamovanie zvuku z televízora, HiFi, osobného počítača alebo podobného zariadenia priamo do vašich načúvacích prístrojov.

V závislosti od vášho televízora, stereofónneho systému HiFi, osobného počítača alebo inej zvukovej zostavy si pozrite informácie o inštalácii zariadenia TV-Streamer+ v časti „Ako nainštalovať zariadenie“. Sprievodca pripojením vám ukáže, ako správne vykonať pripojenia.

Hlavné funkcie

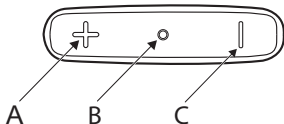

- A. Zvýšenie hlasitosti
- B. Indikátor výkonu
- C. Zníženie hlasitosti

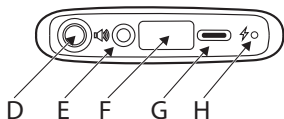

- D. Tlačidlo párovania/nastavenia režimu oneskorenia
- E. Audio vstup: analógový alebo digitálny (optický)
- F. Sériové číslo
- G. Napájanie: USB-C
- H. Kontrolka LED: napájanie

Informácie o LED dióde

Vzory streamovacích a párovacích LED diód.

Vzory LED diód	Proces	Opis
	Streamovanie	Stále zapnutá
	Pohotovostný režim	Stále vypnutá
	Režim párovania	Blikanie
	Úspešné párovanie	Stále zapnutá pod dobu 3 sekúnd
	Aktualizácia firmvéru	Rýchle blikanie
	Nastaviteľný režim oneskorenia	Dlhé blikanie
	Problém so softvérom (vyžaduje sa reštart/reset)	3 stredne dlhé blikania sa opakujú
	Aktualizácia firmvéru bola dokončená	Stále zapnutá pod dobu 3 sekúnd


Ako nainštalovať zariadenie

Pripojte zariadenie k zdroju napájania

Zariadenie je možné napájať priamo zo zásuvky USB-A na televízore prostredníctvom dodaného kábla USB-A na USB-C. Konektor USB-A možno alternatívne zasunúť do akéhokoľvek vhodného zdroja napájania.

Konektor USB-C sa zasúva do zariadenia .

Po pripojení napájacieho kábla k zdroju napájania sa na zadnej strane zariadenia rozsvieti biela LED dióda, ktorá signalizuje zapnutie.

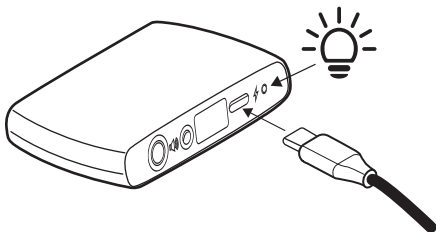


Možnosti káblového pripojenia

Na privedenie zvukového signálu do zariadenia TV Streamer+ môžete použiť analógový alebo digitálny (optický) zvukový kábel. TV-Streamer+.

Pripojenie analógového kábla


V prípade televízora s analógovým zvukom: zasunúť analógový kábel 2-do-1 do ľavého a pravého audio konektoru na televízore a druhý koniec do zariadenia TV-Streamer+.

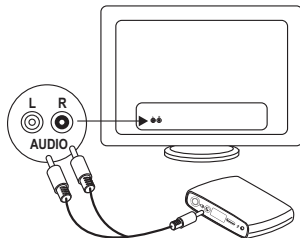

Pripojenie digitálneho kábla

Digitálny (optický) kábel má na oboch koncoch kryt, ktorý sa musí pred použitím odstrániť.

Zasuňte štvorcový konektor na kábli do výstupu TV DIGITAL AUDIO OUT a okrúhly konektor do zariadenia TV-Streamer+.

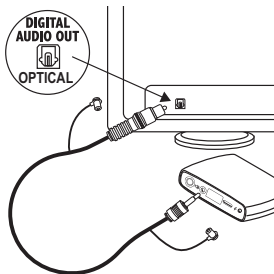

Prvé použitie zariadenia

Skôr ako začnete používať zariadenie na prenos zvuku do načúvacích prístrojov, musíte zapojiť do elektrickej zásuvky, k televízoru a spárovať s načúvacími prístrojmi.

Zariadenie pripájajte len k zariadeniam, pre ktoré je určené.


POZNÁMKA: Po pripojení všetkých káblov a po spárovaní zariadenia s načúvacími prístrojmi vám odporúčame pripevniť zariadenie na zadný panel televízora

Spárovanie zariadenia s načúvacími prístrojmi

Ak chcete prenášať zvuk zo zariadenia do načúvacích prístrojov, musíte zariadenie spárovať s načúvacími prístrojmi.

POZNÁMKA: Ak chcete zabrániť náhodnému spárovaniu, vypnite všetky ostatné načúvacie prístroje v okolí. Ak nie je možné vypnúť načúvacie prístroje, ktoré nechcete spárovať, umiestnite ich aspoň 1 meter (3 stopy) od zariadenia.

1. Zariadenie a načúvacie prístroje musia byť zapnuté a musia byť od seba vzdialené do 5 cm (2 palce).
2. Režim párovania sa aktivuje rýchlym stlačením párovacieho tlačidla na zadnej strane zariadenia. Stlačte tlačidlo, kým predná LED dióda nezačne v krátkych intervaloch blikáť na zeleno.
3. Načúvacie prístroje sa spárujú po jednom.
4. Po spárovaní prvého načúvacieho prístroja LED dióda prestane blikáť na 3 sekundy. Zariadenie potom automaticky pokračuje v párovaní druhého načúvacieho prístroja.
5. Po spárovaní zariadenia s načúvacími prístrojmi sa po zapnutí zariadenia začne do načúvacích prístrojov prenášať zvuk.

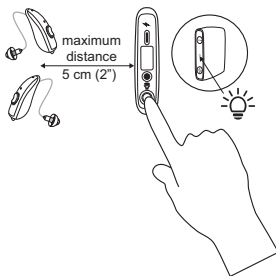

Sekvencia LED pri párovaní

Párovanie zariadenia TV-Streamer+ je dostupné 3 minúty, ale streamovanie sa môže spustiť ešte pred ukončením párovania.

- Blikajúca LED dióda = prvé spárovanie (približne 12 sekúnd)
- LED dióda je stále zapnutá
- Blikajúca LED dióda = druhé spárovanie (približne 12 sekúnd)


- LED dióda je stále zapnutá
- Blikajúca LED dióda = hľadanie ďalších načúvacích prístrojov (približne 15 sekúnd)
- LED dióda je stále zapnutá = streamovanie.

Nastavenie hlasitosti

Zvuk zariadenia je nastavený tak, aby poskytoval pohodlnú úroveň počúvania od momentu zapnutia. Pre väčšie pohodlie však môžete úroveň zvuku kedykoľvek upraviť na.

Zmena hlasitosti: Hlasitosť zvýšite stlačením tlačidla „+“ a znížite stlačením tlačidla „-“.


Pred pripojením zariadenia k televízoru sa odporúča nastaviť hlasitosť.

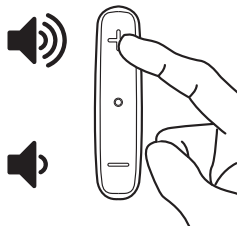


Nastaviteľný režim oneskorenia

Niektoré zvukové systémy vytvárajú oneskorenie pri prenášaní zvuku. Toto oneskorenie môže spôsobiť, že obraz z televízora nebude zodpovedať vysielanému zvuku. Režim oneskorenia umožňuje zosúladiť obraz televízora so zvukom predĺžením alebo skrátením času medzi streamovaním zvuku do načúvacích prístrojov.

1. Režim oneskorenia sa aktivuje po stlačení tlačidla párovania na 10 sekúnd. LED dióda bude v dlhých intervaloch blikat' na zeleno, čo potvrdzuje, že ste v režime nastavenia oneskorenia.

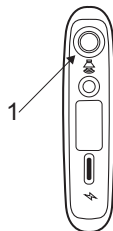

2. Stlačením tlačidla + alebo - zvýšite alebo znížite oneskorenie zvuku z televízora.

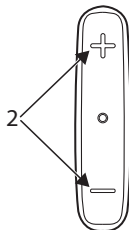


3. Ak chcete opustiť režim pre nastavenie oneskorenia, stlačte a podržte tlačidlo párovania/odloženia na 3 sekundy alebo reštartujte zariadenie TV-Streamer+ vytiahnutím a opätovným vložením napájacieho kábla.

Umiestnenie zariadenia

Hoci zariadenie TV-Streamer+ môžete umiestniť takmer kamkoľvek v rámci obmedzení dĺžky kábla, odporúča sa ho pripevniť TV-Streamer+ na zadný panel

televízora. Odstráňte jeden z plastových krytov z lepiacich podložiek so suchým zipsom a umiestnite lepiacu podložku na zariadenie TV-Streamer+. Odstráňte zvyšný plastový kryt z podložky a umiestnite zariadenie do blízkosti okraja alebo hornej časti televízora na zadnom paneli.

- A. Suchý zips
- B. Odporúčané možnosti pre pripevnenie zariadenia TV-Streamer+
- C. Nepripevňujte TV-Streamer+ do stredu televízora

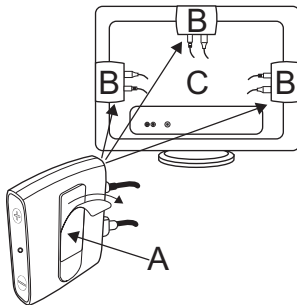

Ako aktivovať streamovanie

POZNÁMKA: Uistite sa, že vaše zariadenie TV-Streamer+ je zapnuté.
Existujú tri spôsoby streamovania.

- Stlačte nakonfigurované tlačidlo na načúvacom prístroji
- AutoStreaming
- Začnite v aplikácii.

Váš odborník pre starostlivosť o sluch môže nakonfigurovať spôsob aktivácie streamovania pomocou tlačidla načúvacieho prístroja.

Čo je AutoStreaming?

Keď je aktivovaná funkcia AutoStreaming, vaše zariadenie TV-Streamer+ automaticky spustí streamovanie do spárovaných načúvacích prístrojov vždy, keď je zariadenie TV-Streamer+ alebo načúvacie prístroje zapnuté.

AutoStreaming môžete povoliť/zakázať v aplikácii pre načúvacie prístroje alebo váš odborník pre starostlivosť o sluch.

Predvolene je zariadenie zariadenie a zariadenie TV-Streamer+ je vypnuté.

Každodenné používanie

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Zapnite televízor. Ak chcete prijať streamovaný zvuk televízora v načúvacích prístrojoch, stlačte programové tlačidlo. Ak sa neprehráva žiadny zvuk, pozrite si predchádzajúcu časť „Ako aktivovať streamovanie“.

Zvuk z televízora sa potom zmieša s ostatnými zvukmi, ktoré zachytávajú vaše načúvacie prístroje.

Ak chcete vypnúť zvuk televízora, stlačte programové tlačidlo nakonfigurované na načúvacom prístroji alebo vypnite televízor.

Keď zariadenie TV-Streamer+ nepoužívate dlhší čas, odpojte napájací zdroj zo zásuvky



VÝSTRAHA: Pri odpojovaní kábla uchopte a vytiahnite konektor, neťahajte za kábel.

Iné zdroje zvuku

Zariadenie TV-Streamer+ môžete používať so zariadeniami, ktoré majú kompatibilné audio výstupy, napríklad s osobným počítačom alebo inými audio systémami.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť zvuku televízora môžete upraviť na vašich načúvacích prístrojoch (nahor / nadol), na diaľkovom ovládači načúvacieho prístroja (voliteľné) alebo v aplikácii (voliteľné).

Ďalšie informácie o týchto alternatívnych možnostiach ovládania zariadenia TV-Streamer+ získate od svojho odborníka pre starostlivosť o sluch.

Pripojenie zariadenia a aplikácie pre načúvacie prístroje

Zariadenie môžete ovládať prostredníctvom rovnakej aplikácie, ktorá podporuje vaše načúvacie prístroje.

To vám umožní spustiť a ukončiť streamovanie a upraviť hlasitosť prostredníctvom aplikácie.

Aplikácia poskytuje prístup k viacerým možnostiam nastavenia zvuku, napríklad vysielanie zvuku Auracast™ a nastavenie oneskorenia zvuku.

V prípade potreby aplikácia poskytne upozornenia na aktualizácie a vylepšenia firmvéru.

Stiahnite si aplikáciu alebo požiadajte svojho odborníka pre starostlivosť o sluch o ďalšie informácie.

POZNÁMKA: Zariadenia od partnerských spoločností nemusia mať rovnaké funkcie aplikácie.

Telefonické hovory

Ak sú vaše načúvacie prístroje pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete aj pri používaní zariadenia prijímať telefónne hovory.

V načúvacích prístrojoch budete počuť upozornenie signalizujúce prichádzajúci hovor a načúvacie prístroje automaticky zastavia zvukový signál zo zariadenia, ak sa rozhodnete prijať prichádzajúci hovor - ďalšie informácie o tom, ako prijímať telefónne hovory, nájdete v návode na používanie načúvacieho prístroja alebo partnerského zariadenia. Po skončení telefónneho hovoru sa načúvacie prístroje automaticky prepnú späť na zvukový signál

Rozsah

Rozsah streamovania od zariadenia po načúvacie prístroje je až do 7 metrov (23 stôp), v závislosti od načúvacieho prístroja. Zariadenie nemusíte mať na dohľad, môžete byť v inej miestnosti. Rušivé vplyvy prostredia, ako sú steny alebo nábytok, však môžu znížiť prevádzkový rozsah.

Ak sú načúvacie prístroje mimo dosahu zariadenia, prenos zvuku sa zastaví. Keď sa načúvacie prístroje vrátia do rozsahu zariadenia, zvukový signál sa automaticky obnoví.

Na automatické opätovné pripojenie je stanovený časový limit 5 minút. Ak ste mimo dosahu dlhšie ako 5 minút, budete musieť reštartovať streamovanie manuálne prostredníctvom načúvacích prístrojov alebo aplikácie.

Toto zariadenie obsahuje RF vysielač, ktorý pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 2,4 GHz do 2,48 GHz.

Resetovanie zariadenia

Ak LED indikátor bliká v intervale 3 opakujúcich sa stredne dlhých bliknutí, môže ísť o softvérový problém, ktorý si vyžaduje reštart zariadenia. Tento problém možno vyriešiť jednoduchým reštartovaním systému.

Reštartovanie zariadenia: odpojte a zapojte napájací zdroj. Ak z nejakého dôvodu chyba pretrváva niekoľko pokusov o reštart, zariadenie je potrebné poslať do servisu.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti + na 10 sekúnd a súčasne zapnite zariadenie.

Všeobecné varovania a bezpečnostné opatrenia



VÝSTRAHA:

- Zariadenie TV-Streamer+ môže interferovať s inými zariadeniami.
Ak používate zariadenie TV-Streamer+ a zariadenie je ovplyvnené elektromagnetickým rušením, odsuňte sa od zdroja.
- Pri používaní bezdrôtových funkcií používajú svoje zariadenie TV-Streamer+ na komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami digitálne kódované prenosy s nízkym výkonom. Je možné, ale nie pravdepodobné, že ovplyvnia iné elektronické zariadenia. Ak k tomu dôjde, presuňte zariadenie TV-Streamer+ od dotknutého zariadenia.
- Externé zariadenia pripojené k elektrickému vstupu musia byť bezpečné podľa príslušných požiadaviek noriem IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60065 alebo IEC 60950-1, IEC 62368-1 v prípade potreby.
- Nie sú povolené žiadne úpravy tohto zariadenia.
- Udržujte zariadenie a všetky šnúry a káble mimo dosahu strojov v prevádzke.
- Ak dôjde k prehriatiu, pádu, poškodeniu alebo ponoreniu do kvapaliny alebo ak je poškodený jeho napájací adaptér, kábel alebo zástrčka, prestaňte ho používať a kontaktujte svojho odborníka pre starostlivosť o sluch.
- Nepoužívajte v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo kde hrozí nebezpečenstvo vznietenia horľavých plynov.

- Nevystavujte váš prístroj dažďu, vlhkosti či iným tekutinám, aby ste prístroj ochránili pred poškodením alebo seba pred zranením.
- Udržujte svoje načúvacie prístroje a zariadenia spolu s akýmkoľvek časťami, batériami a magnetmi mimo domácych miláčikov, detí a ľudí s kognitívnymi, intelektuálnymi alebo duševnými problémami.
- Vždy používajte najnovšiu dostupnú aktualizáciu softvéru pre vaše zariadenie.



POZOR:

- Vysoko výkonné elektronické zariadenia, veľké elektronické inštalácie a kovové konštrukcie môžu výrazne znížiť prevádzkový rozsah.
- Ak načúvacie prístroje nereagujú na zariadenie kvôli neobvyklému narušeniu poľa, odsuňte sa od rušivého poľa.
- Používajte iba originálne príslušenstvo GN Hearing A/S.
- Nepoužívajte toto zariadenie na miestach, kde je zakázané používať elektronické zariadenia.
- Vaše načúvacie prístroje a toto zariadenie dostali počas montáže jedinečný komunikačný kód. To zaisťuje, že zariadenie nebude mať vplyv na načúvacie prístroje, ktoré nosia ostatní.
- Zariadenie TV-Streamer+ smie opravovať iba autorizované servisné stredisko.
- Otvorenie alebo úprava zariadenia TV-Streamer+ ho môže poškodiť. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie je možné vyriešiť podľa pokynov na nápravu v časti riešenia problémov tohto návodu na používanie, obráťte sa na svojho odborníka pre starostlivosť o sluch.

Údržba

Čistenie

Zariadenie vyčistíte vlhkou handričkou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte domáce čistiace prostriedky (prací prášok, mydlo atď.) ani alkohol.

Servis

Toto zariadenie nie je možné opravovať ani servisovať v domácich podmienkach. Ak zariadenie nefunguje podľa očakávania, obráťte sa na vášho odborníka pre starostlivosť o sluch, ktorý vám pomôže.

Kontrolný zoznam spojení

Ak nepočujete zvuk z televízora alebo iného zdroja zvuku, skontrolujte nasledovné:

- Otestujte pripojenie k zariadenia TV-Streamer+ k načúvacím prístrojom – pozrite si časť „Párovanie zariadenia“.
- Otestujte pripojenie zariadenia TV-Streamer+ k televízoru alebo zvukovému zariadeniu – pozrite si časť „Ako nainštalovať zariadenie“.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne vložené do zariadenia TV-Streamer+ a televízora alebo zvukového zariadenia
- Skontrolujte, či je zariadenie TV-Streamer+ je napájané – vyhľadajte kontrolku na zariadení TV-Streamer+ – pozrite si časť „Ako nainštalovať zariadenie“.

POZNÁMKA: Ak po pripojení načúvacích prístrojov k zariadeniu TV-Streamer+ cez audio kábel počujete bzučanie, vykonajte nasledujúce kroky pre odstránenie tohto problému:

- pripojte zariadenie TV-Streamer+ k televízoru pomocou digitálneho (optického) kábla
- použite externý zdroj napájania
- zvýšte hlasitosť televízora a znížte hlasitosť načúvacích prístrojov.

Technické špecifikácie

Rozmery	
Dĺžka x šírka x výška	70,6 × 15,7 × 49,5 mm (2,7 x 0,6 x 1,9")

Prevádzkové podmienky	
Prevádzkový rozsah	Do 7 metrov (23 stôp)
Napájanie	Napájanie kompatibilné s USB 5V DC
Bezdrôtové pripojenie	2,4 GHz
Menovitý vysielaný výstupný výkon RF je	maximálne 12,0 dBm
Rozsah prevádzkovej teploty	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)

Teplotné podmienky	
Rozsah skladovacích teplôt	-25 °C až 70 °C (-13 °F až 158 °F)
Testovanie teploty	Prístroj sa podrobuje rôznym testom pri teplotných a vlhkých cykloch ohrevu v rozmedzí od -25 °C do 70 °C podľa interných a priemyselných noriem.

Regulačné informácie

Záruky a opravy

Na zariadenie TV-Streamer+ sa vzťahuje záruka vydaná výrobcom na obdobie 12 mesiacov odo dňa nákupu. Upozorňujeme, že vo vašej krajine môžu platiť rozšírené záruky. Požiadajte svojho odborníka pre starostlivosť o sluch o ďalšie informácie.

Na čo sa vzťahuje táto záruka

Akýkoľvek elektrický komponent, ktorý z dôvodu spracovania, výrobných alebo konštrukčných chýb nefunguje správne pri bežnom používaní počas trvania tejto záruky, bude po vrátení na miesto nákupu vymenený alebo opravený bez poplatku za náhradné diely alebo prácu.

Ak sa zistí, že oprava nie je možná, môže sa po vzájomnej dohode odborníka pre starostlivosť o sluch a zákazníka vymeniť celá jednotka za ekvivalentnú jednotku.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka

Problémy vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním alebo starostlivosťou, nadmerným používaním, nehodami, opravami vykonanými neoprávnenou osobou, vystavením korozívny podmienkam alebo poškodením spôsobeným vniknutím cudzích predmetov do zariadenia NIE sú kryté zárukou a môžu viesť k jej zrušeniu. Vyššie uvedená záruka nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktoré by ste mohli mať podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa predaja spotrebného tovaru. Váš odborník pre starostlivosť o sluch môže poskytnúť záruku, ktorá presahuje ustanovenia tejto obmedzenej záruky. Požiadajte svojho odborníka pre starostlivosť o sluch o ďalšie informácie.

Predpokladaná životnosť

Predpokladaná prevádzková životnosť zariadenia je minimálne 5 rokov.

Vyhlásenie

Tento prístroj je v súlade s časťou 15 predpisov FCC.

Na prevádzku sa vzťahujú tieto dve podmienky: 1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé interferencie a 2) tento prístroj musí prijať akékoľvek rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželané správanie.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskými pravidlami ICES-003.

Poznámka. Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred škodlivým rušením v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať škodlivú vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže rušiť rádiovú komunikáciu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rádiového alebo televízneho signálu, čo môžete zistiť jeho zapnutím a vypnutím, odporúča sa vykonať jedno alebo viac z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi regulačnými požiadavkami

- V EÚ: Prístroj spĺňa všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa prílohy I nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach 2017/745 (nariadenie o zdravotníckych pomôckach).
- Spoločnosť GN Hearing A/S týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SAS-4 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie vyhlásenia EÚ o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:
www.declarations.resound.com/en
- V USA: FCC CFR 47 časť 15, podčasť C.

Model: SAS-4; FCC ID: X26SAS-4; IC: 6941C-SAS-4.

Ďalšie identifikované uplatniteľné medzinárodné regulačné požiadavky v krajinách mimo EÚ a USA nájdete v miestnych požiadavkách krajiny pre tieto oblasti.

Súlád s japonským zákonom o rádiových zariadeniach a japonským obchodným zákonom o telekomunikáciách: Tento prístroj je certifikovaný podľa japonského zákona o rádiových zariadeniach (電波法) a japonského obchodného zákona o telekomunikáciách (電気通信事業法).

Podakovania

Časti tohto softvéru napísal Kenneth MacKay (micro-ecc) a sú licencované podľa týchto podmienok:

Autorské práva © 2014, Kenneth MacKay. Všetky práva vyhradené.

Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme s úpravou alebo bez úpravy sú povolené, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

- Pri ďalšej distribúcii zdrojového kódu musí byť vždy uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a toto vzdanie sa zodpovednosti.
- Pri ďalšej distribúcii v binárnej forme musí byť v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých v rámci distribúcie vždy reprodukované oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a toto vzdanie sa zodpovednosti.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A ODMIETAJÚ SA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE NAPRÍKLAD SKRYTÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ DRŽITEL' AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAPRÍKLAD VRÁTANE OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB; STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKOKOLVEK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOLVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, AKO JE ZMLUVA, OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ ALEBO NEPOVOLENÉ KONANIE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INÁČ), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE VEDOMOSTI O MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY.

© 2025 GN Hearing A/S. Všetky práva vyhradené.

Záručný list



Model

Výr. číslo

Dátum výdaja

Podpis



Model

Výr. číslo

Pečiatka:

Máte problémy? Navštívte servis načúvacích prístrojov.

Pokiaľ je prístroj v záruke, nepokúšajte sa ho v žiadnom prípade otvárať. Stratíte tým nárok na záručnú opravu.

Záručné podmienky:

Na načúvací prístroj značky , ktorý Vám bol pridelený, je záruka 24 mesiacov odo dňa vydania. V rámci záručnej doby Vám budú po predložení tohto záručného listu výrobné závady bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym ošetrovaním, zanesením prístroja ušným mazom, neodborným zásahom, vytečenými batériami alebo mechanickým poškodením načúvacieho prístroja.

Záručný a pozáručný servis:

Audiofon s. r. o.
Kapitána Jaroša 3A
974 11 Banská Bystrica 5
Slovenská republika
Tel.: 048/414 27 12
E-mail: bb@audiofon.sk
www.audiofon.sk

Poznámky

Výrobca podľa nariadenia EÚ
2017/745 o zdravotníckych
pomôckach:



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko



Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, je potrebné nahlásiť zákonnému výrobcovi GN Hearing A/S a príslušnému orgánu členského štátu EÚ, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.